

SoftCut

для обработки керамических реставраций

Набор SoftCut разработан для двухэтапной полировки хрупких керамических виниров, вкладок и накладок. В набор входят инструменты SoftCut PA и SoftCut PB. Это силиконовые полиры с содержанием полировочных компонентов. Изменяя усилие нажима на реставрацию, можно менять характеристики полировки – чем слабее нажим, тем сильнее блеск.




PA

PB

Показания

Контурирование и полировка керамики

- SoftCut PA (с зеленой полоской на хвостовике) для полировки после грубого финирирования (например, камнями Dura-Green)
- SoftCut PB (с синей полоской на хвостовике) для полировки после тонкой финишной обработки (например, камнями Dura-White)

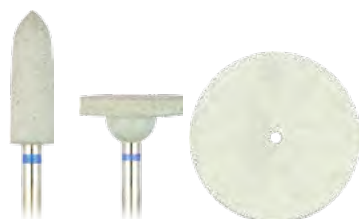

	Форма	PC2	WH6	Несмонт. колесо
	№ по ISO	050	120	220
SoftCut PA	HP		0564	0595
SoftCut PB	HP	0563	0565	0596

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Контурирование и полировка всего за один этап
- Точное центрирование
- Эффективность в применении
- Незначительное нагревание



Полиры:

Об./мин. Реком.: 5 000-20 000 / макс: 20 000 / УН: 1-2 Н



Несмонтированное колесо:

Об./мин. Реком.: 5 000-15 000 / макс: 15 000 / УН: 1-2 Н

Номер	Кол-во	Изделие
0563-0565	12 шт.	SoftCut PA / PB, формы: PC2, WH6, хвостовик HP
0595-0596	12 шт.	SoftCut PA / PB, форма: несмонтированное колесо